


**ARGO LAB
M2-A
Agitateur
magnétique à
plaque
chauffante
analogique**

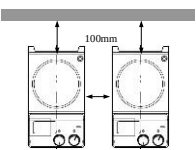


***Manuel
d'utilisation***

ARGO LAB

	- Lisez les instructions attentivement avant utilisation - S'assurer que seul le personnel qualifié à l'aide de cet outil
	Soyez très prudent lorsque vous touchez la plaque chauffante. Il peut atteindre une température de 340 ° C. attention, même lorsque le pouvoir a été désactivé parce que la plaque restera chaud plus longtemps.
	Avant toute utilisation, assurez-vous que l'instrument est branché à une prise avec un raccord à la masse.
	Observer la distance minimale entre les instruments et entre l'appareil et le mur (minimum 10 cm).

2 Le control et l'affichage

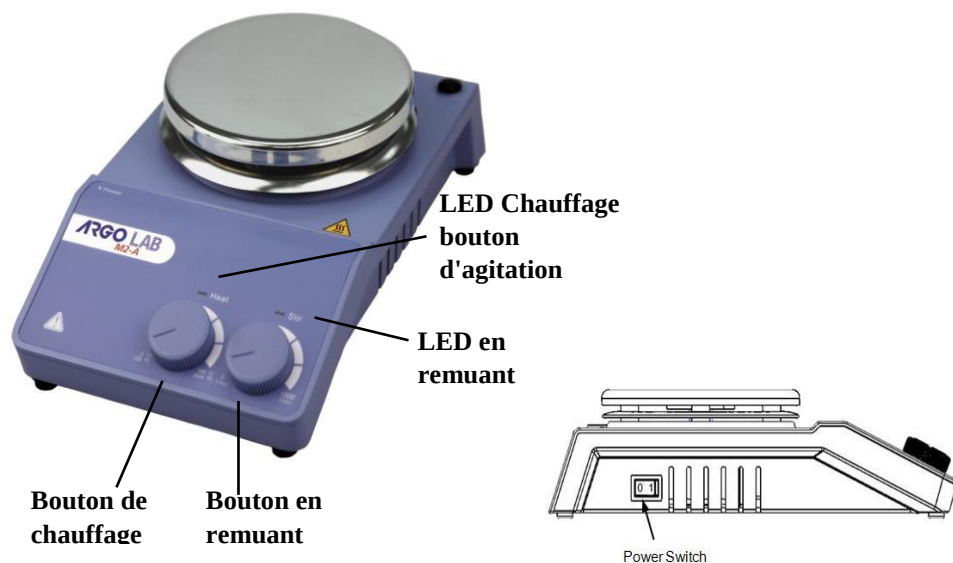

Articles	Descriptions
Bouton d'agitation Remuer	Définir la vitesse de rotation désirée entre 0 et 1500 tr/mn. La fonction de brassage est activé / désactivé en tournant la molette.
Bouton de chauffage	Régler la température désirée entre la température ambiante et ° C. La fonction de brassage est activé / désactivé en tournant la molette.
LED Chauffage	Lorsque la fonction est activée, le voyant de chauffage est en marche.
Bouton en remuant	Lorsque la fonction est activée, la LED est allumée.
Power switch	Permet d'activer ou désactiver l'instrument.

Opération 3

- Placez l'appareil sur une surface stable, assurez-vous que le bouton de réglage de température est réglée au minimum et connecter l'alimentation
- Mettez l'instrument.
- Tournez le bouton de commande pour définir la vitesse de la vitesse de rotation nominale dans la limite de la vitesse de tr/min 0-1500.
- Tourner le bouton de commande de température pour régler la température requise dans la limite de sécurité 2-8040 ° C.

4 Défauts

- En cas de défaillance de l'instrument l'arrêter.
- Mettez l'interrupteur principal MARCHE / ARRÊT pendant quelques secondes, puis le remettre.
- La fonction d'agitation continue à fonctionner à la vitesse définie avant qu'il s'est produit le défaut.
- La fonction de chauffage continue à fonctionner à la température réglée avant qu'il s'est produit le défaut
- Si le problème n'est pas résolu, contactez votre centre de service technique.

5 Entretien et nettoyage

- Le bon entretien de l'instrument garantit les conditions et prolonger sa durée de vie.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.
- Lors du nettoyage, veillez à ne pas pulvériser le nettoyant à l'intérieur de l'instrument.
- Utiliser uniquement un détergent doux et ne contient pas d'abrasifs.
- Avant de commencer avec des produits de nettoyage ou de décontamination, l'utilisateur doit s'assurer que la méthode utilisée n'endommage pas l'instrument.
- Porter une protection appropriée lors du nettoyage avec des produits chimiques
- Si l'instrument doit être retourné pour réparation, il est nécessaire un nettoyage approprié et

La décontamination par des agents pathogènes. Vous devez également mettre l'appareil dans son emballage d'origine à l'envoyer à réparer

Matériau de plaque chauffante	Acier inoxydable
Diamètre plaque chauffante	Mm
Puissance de chauffage	W
Gamme de température	RT à 340 °C
Indication de température	Analog
Dimensions (L x P x A)	X 160 x 65 mm
Poids	2,8 kg
Température ambiante admissible	- 40 °C
Humidité relative autorisée	80 %
Classe de protection IP	IP42

6 L'aliénation



Informations concernant l'élimination des équipements électriques andelectronic'Union européenne.L'équipement électrique et électronique par le symbole surle côté-ci ne peuvent être éliminés dans les décharges.Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE, les utilisateurs européens de l'équipement électrique andelectronic ont la possibilité de donner en retour, pour le distributeur, ormanufacturer au moment de l'achat d'un nouveau.L'élimination illégale d'équipements électriques et électroniques est puni d'une amende administrative.

Fréquence de tension	220V - 50/60Hz
Power	530W
Max en remuant quantité (H2O)	20 litres
Max barre magnétique	80 mm
Type de moteur	Moteur brushless
La plage de vitesse	0 1500 tr/min...
L'indication de vitesse	Analog