

Kastrationsgerät für Ferkel

Funktionelles Design:


- schnelle und sichere Fixierung
- hygienisch und leicht zu reinigen, da ganz aus Edelstahl
- Fixierung für Kastration und Eiseninjektionen

Kleines Modell:


für Ferkel von 2 - 9 Tagen

Großes Modell:


für Ferkel von 10 - 20 Tagen

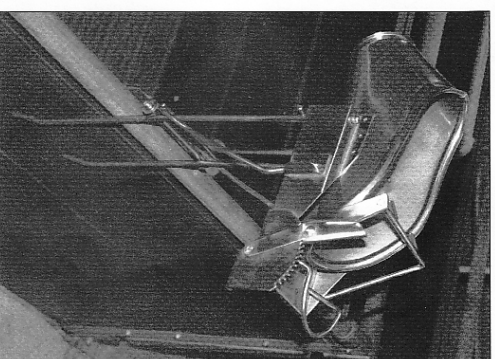

Das Ferkel wird auf dem Rücken liegend mit dem Kopf nach vorne in das Gerät gelegt.

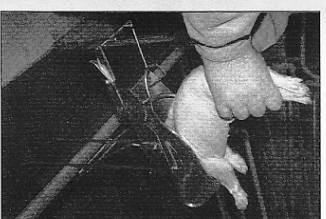

Durch Anbringen einer Klemme in Richtung des Kopfes des Ferkels werden die Hinterpfoten fixiert und die Körperhälften gespannt. Die Klemme ist auf die Größe des Ferkels einstellbar. Verwendbar für Kastration, Schwanzkupierungen und Eiseninjektionen.

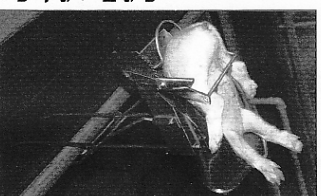

Appareil à castrer

Design fonctionnel



- Fixation rapide et sûre
- hygiène, nettoyage facile, tout inox
- contention pour castration et injections féruignes

Petit modèle

Porcelets de 2 à 9 jours


Grand modèle

Porcelets de 10 à 20 jours

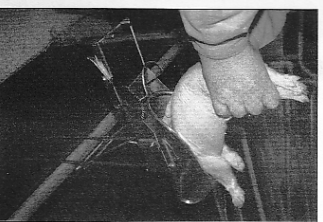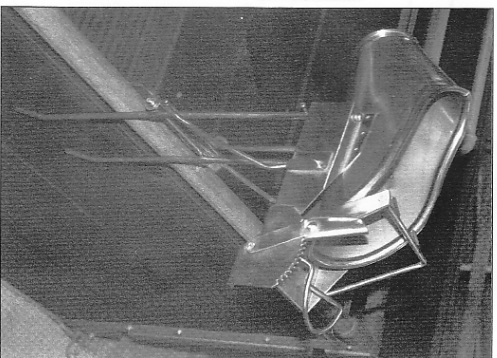

Le porcelet est posé sur le dos, sa tête est bloquée et ses postérieurs attachés

Peut être utilisé pour couper les queues ou pour des interventions vétérinaires. Structure acier. Entretien et nettoyage facile

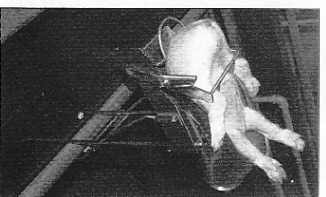

Castration Device, stainless steel

Functional Design:



- secure fixation, easy to handle
- hygienic and easy to clean, made of stainless steel
- fixation for castration and iron injections

Small model:

for piglets from 2 - 9 days

Large model:

for piglets from 10 - 20 days

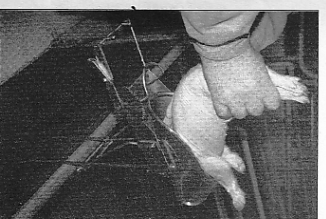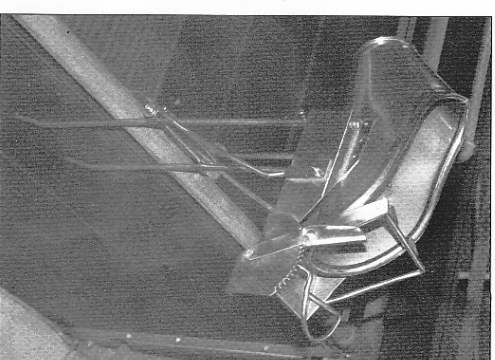

The piglet has to be placed in the device lying on its back with its head to the front.

By attaching a clamp in direction of the piglet's head the hind legs are fixed and the lower body is restrained. Useable for castration, tail docking an iron injections.

