

1609932

MS Smartscan Wireless 1.0

Questo ecografo portatile è un prodotto veterinario controllato da software. Il Wi-Fi permette di ottenere segnali ultrasonici in tempo reale, che vengono trasmessi su dispositivi Android come smartphone o PC tablet.

Smartscan viene consegnato in una valigetta con una sonda **wireless**, che può comunicare con il tablet in dotazione via WIFI. Il sistema wireless permette di raggiungere punti difficilmente accessibili.

Questo ecografo può essere utilizzato solo per il test di gravidanza. È sufficiente premere il pulsante per scattare immagini dello schermo o per fare un video dell'ecografia dell'animale gestante. Il tablet può essere portato sull'avambraccio utilizzando il cinturino da polso in dotazione o, se lo si desidera, a tracolla.



1609931

MS Smartscan Wireless 2.0

Oltre al test di gravidanza, la sonda può essere utilizzata anche per misurare lo spessore del grasso.

1609930

MS Smartscan Wireless 3.0

È dotato di un modulo RFID che consente la scansione di un transponder, in modo che i dati dell'animale possano essere salvati rapidamente.

Specifiche	Wireless 1.0	Wireless 2.0	Wireless 3.0
Frequenza 3.5 mhz	X	X	X
Controllo profondità Regolabile a 100-180 mm	X	X	X
Elaborazione dell'immagine con miglioramento dei bordi, in relazione al frame rate	X	X	X
Immagini salvate in formato JPG	X	X	X
Video salvato in formato .MP4	X	X	X
Rapporto sulla gestazione in formato PDF	X	X	X
Cineloop: Max 128 frame (Cineloops registrati con velocità di frame elevate possono contenere più frame)	X	X	X
Durata: Più di 3 ore di uso continuo	X	X	X
Spessore del grasso: misurazione e memorizzazione automatica dei dati		X	X
Collegamento del numero di identificazione dell'animale lettura di FDX o HDX tramite RFID			X



Il sistema wireless ne facilita l'uso e si evitano eventuali distacchi o rotture del cavo; fornito completo in una robusta custodia, display chiaro ad alta risoluzione.

Istruzioni Veloci

1609930 MS Smartscan 3.0 (Con modulo FDX e HDX per RFID)


1609931 MS Smartscan 2.0

1609932 MS Smartscan 1.0

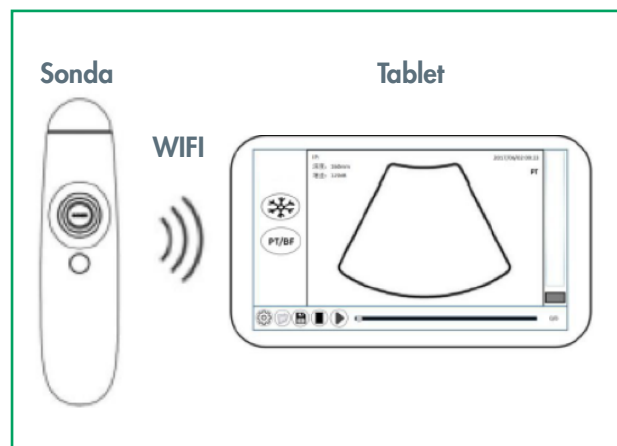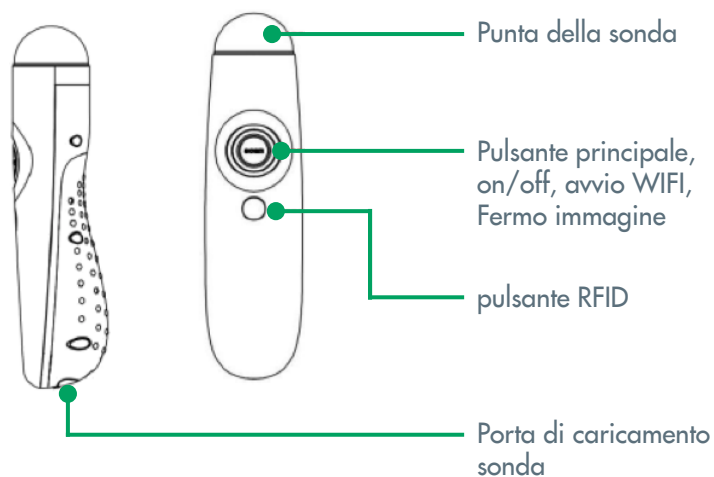

Leggere prima le istruzioni per l'uso


App Smartscan

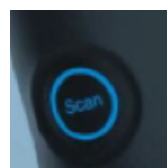

Premere e tenere premuto il pulsante per 7 secondi. Inizierà a lampeggiare una luce. La sonda comincerà a cercare automaticamente un segnale WIFI funzionante.



A questo punto aprire l'app Smartscan premendo su questa icona. Il tablet verrà collegato alla sonda.

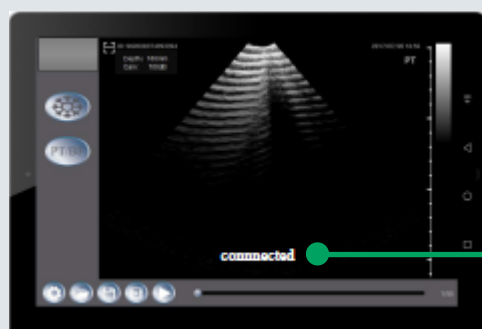

Connessi: sonda e tablet sono connessi

Premere ancora il pulsante principale per iniziare la scansione