

1609932

MS Smartscan, kabellos 1.0

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Software-gesteuerten Hand-Veterinär-Scanner. Hierbei werden Echtzeit-Ultraschallsignale über das WLAN erhalten. Diese Signale sind auf Android-Geräten wie Smartphones oder Tablet-PCs ersichtlich.

Der Smartscan wird in einem Koffer mit einer kabellosen Sonde geliefert, die mit dem bereitgestellten Tablet via WLAN kommunizieren kann. Dieser Scanner kann nur zum Testen auf Trächtigkeit verwendet werden. Das **kabellose** System erleichtert das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.

Mit einem einfachen Knopfdruck können Screenshots oder ein Video vom gesamten Scan des Muttertieres gemacht werden. Das Tablet kann mit dem mitgelieferten Handgelenkband am Unterarm oder, wenn gewünscht, mit dem Schultergurt um den Hals getragen werden.



1609931

MS Smartscan, kabellos 2.0

Zusätzlich zum Testen der Trächtigkeit, kann die Sonde auch verwendet werden, um die Fettdicke zu messen.

1609930

MS Smartscan, kabellos 3.0



Es ist mit einem RFID-Modul ausgestattet, dass das Scannen eines Transponders ermöglicht, um die Daten des Tieres schnell zu speichern.

Eigenschaften	Kabellos 1.0	Kabellos 2.0	Kabellos 3.0
Frequenz 3,5 MHz	X	X	X
Tiefenkontrolle 100-180 mm einstellbar	X	X	X
Bildbearbeitung mit Kantenverbesserung, bezogen auf die Bildrate	X	X	X
Gespeicherte Bilder im JPG-Format	X	X	X
Gespeichertes Video im .MP4-Format	X	X	X
Trächtigkeitsbericht im .PDF-Format	X	X	X
Schleifenfilm: Max. 128 Bilder (Schleifenfilme, die mit hoher Bildgeschwindigkeit aufgenommen wurden, können mehr Bilder enthalten)	X	X	X
Lebensdauer: Mehr als 3 Stunden bei Dauerverbrauch	X	X	X
Speckdicke: Automatische Messung und Speicherung der Daten		X	X
Verbindung zur Tieridentifikationsnummer mit RFID-Lesung von FDX oder HDX			X


Kein Kabelbruch mehr möglich. Wird komplett im robusten Gehäuse geliefert. Klares Display mit hoher Auflösung.

Kurzanleitung


- 1609930 MS Smartscan 3.0 (Mit RFID-Modul FDX und HDX)
- 1609931 MS Smartscan Doppel
- 1609932 MS Smartscan Basic

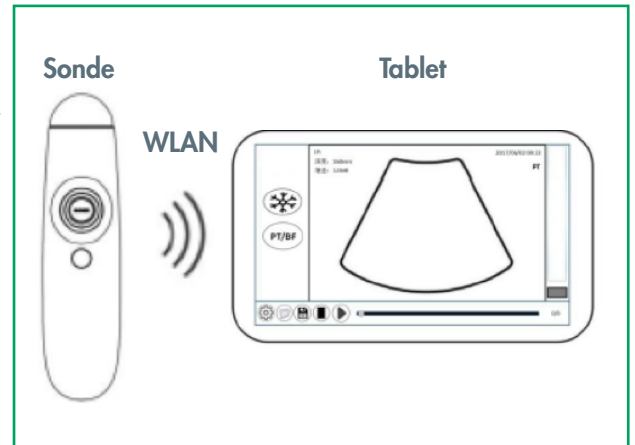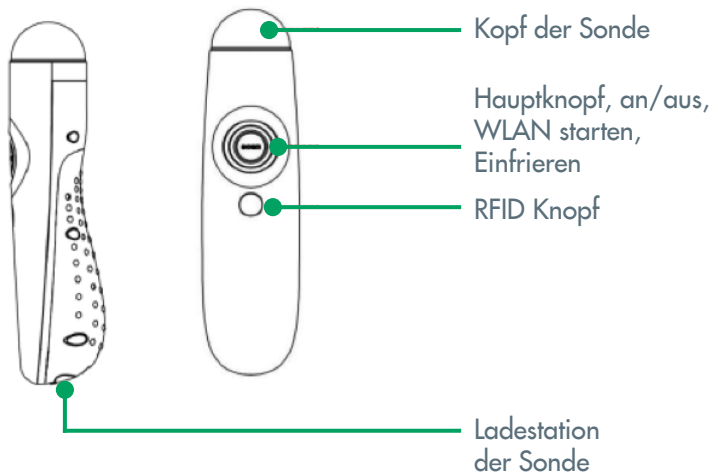


Lesen Sie zuerst die Anweisungen Die Smartscan-App

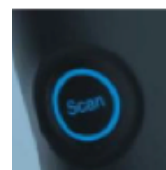

Halten Sie die Haupttaste für 7 Sekunden gedrückt. Ein Licht fängt an zu flackern. Die Sonde sucht automatisch nach einer funktionierenden WLAN-Verbindung.

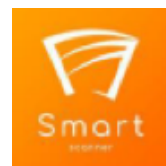

Öffnen Sie nun die Smartscan-App, indem Sie auf dieses Symbol klicken. Das Tablet wird dann mit der Sonde verbunden.

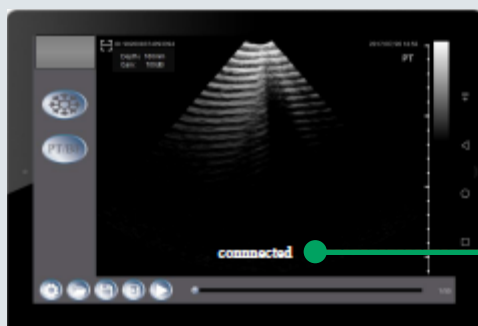

Verbunden - Die Sonde und das Tablet sind verbunden

Drücken Sie die Haupttaste erneut, um den Scanvorgang zu starten.